


Tracheostomietubushalter

Anwendung

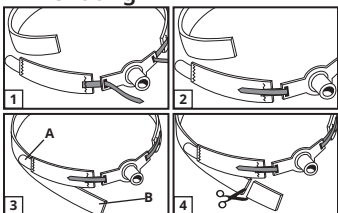

1. Die langen, schmalen Befestigungslaschen durch die Flansche an der Tracheostomieplatte einlegen.
2. Die Laschen über den Flansch zurückbiegen und am Nackenband befestigen.
3. Die Befestigungslasche des kurzen Abschnitts **(A)** am langen Nackenbandabschnitt **(B)** befestigen. Für die richtige Länge und Kompression justieren.
4. Überschüssiges Material **(nur B)** auf die richtige Länge kürzen.

Vorsicht

Nur in einem beaufsichtigten Umfeld verwenden. Stets überwachen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Befestigungslaschen nicht kürzen.

Halter täglich oder bei Bedarf auch häufiger wechseln. Nach dem Badegang des Patienten ebenfalls wechseln.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

