


Tracheosztómias Tubusrögzítők Alkalmazási Utasítások

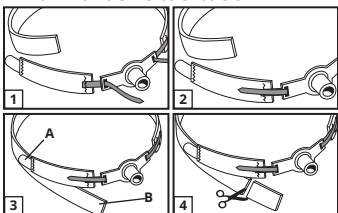

1. Fűzze át a hosszú, keskeny rögzítő füleket a légzőcső kiszélesedett laprészén.
2. Húzza a füleket a lap fölött vissza, és tapassza őket rá a nyakövre.
3. Erősítse a rövid rész **(A)** rögzítő fülét a hosszú nyaköv-részhez **(B)**. Igazítsa be, hogy megfelelő hosszúságú legyen, illetve hogy elég szoros legyen.
4. Vágja le a fölösleges részt **(csak a B-n)**, hogy az öv megfelelő hosszúságú legyen.

Vigyázat!

Csakis felügyelet alatt álló betegeken szabad használni. Tartsa megfigyelés alatt annak megelőzésére, hogy véletlenül kibomoljon. Ne vágjon bele a rögzítőfülekbe.

Naponta, vagy szükség szerint gyakrabban cserélje a tartópántot. A beteg fürdetése után cserélje le.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a www.dalemed.com webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

Szabadalom www.dalemed.com/patents

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

