


## 気管支切開カニューレホルダー

### 使用方法

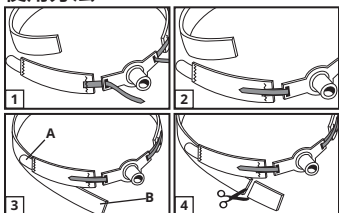

1. 気管支切開カニューレのフランジの孔に細長いファスナータブを通します。
2. タブを折り返してネックバンドに貼り付けます。
3. 短い部分(A)のファスナータブを長いネックバンドの部分(B)に固定します。適切な長さで圧迫感のないように調整して下さい。
4. 余ったバンド部分(Bのみ)を適切な長さに切ります。

### 注意

医療専門家の監督下で使用して下さい。知らないうちにホルダーが外れないよう、注意して下さい。ファスナーのタブを切らないで下さい。

ホルダーは毎日一回又は必要に応じ複数回交換して下さい。患者の入浴後に交換して下さい。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)でご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許 [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland