


기관 절개 유도관 홀더

착용 방법

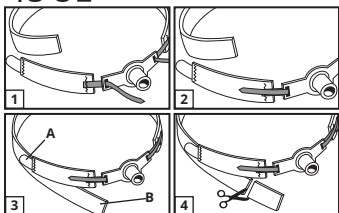

1. 길고 좁은 파스너 탭을 트래치 플레이트 상의 플랜지 안으로 통과시키십시오.
2. 탭을 플랜지 위로 다시 가져와서 넥밴드에 부착하십시오.
3. 짧은 부분(A)의 파스너 탭을 긴 넥밴드 부분(B)에 고정하십시오. 길이나 압축을 적절히 조절하십시오.
4. 남은 부분(B만)을 잘라내어 적절한 길이가 되게 하십시오.

주의

관리 감독이 있는 경우에만 사용하십시오. 뜻하지 않은 이탈을 방지하기 위해 모니터링 하십시오. 파스너 탭을 잘라내지 마십시오.

홀더를 매일 또는 필요에 따라 더 자주 바꾸십시오. 환자가 목욕한 후에 바꾸십시오.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

특허 www.dalemed.com/patents

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland