


Holder for Trakealkanyle

Påsettingsanvisninger

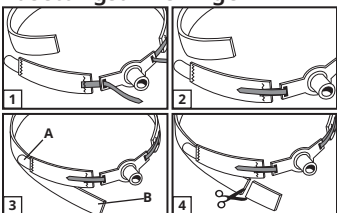

1. Tre de lange, smale festeflikene gjennom åpningene i halsplaten.
2. Før flikene tilbake igjen over åpningene, og fest dem til halsremmen.
3. Fest festefliken på den korte delen (**A**) til den lange delen av halsremmen (**B**). Juster lengden eller strammingen, slik at den blir riktig.
4. Klipp vekk overflødig materiale (**bare B**), slik at lengden blir riktig.

Obs!

Skal bare brukes under tilsyn. Overvåk for å hindre at produktet løsner. Klipp ikke av festeflikene.

Bytt holderen hver dag eller oftere ved behov. Bytt etter at pasienten har badet.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Patentene www.dalemed.com/patents

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

