


Suportes para Tubos de Traqueostomia

Instruções de Aplicação

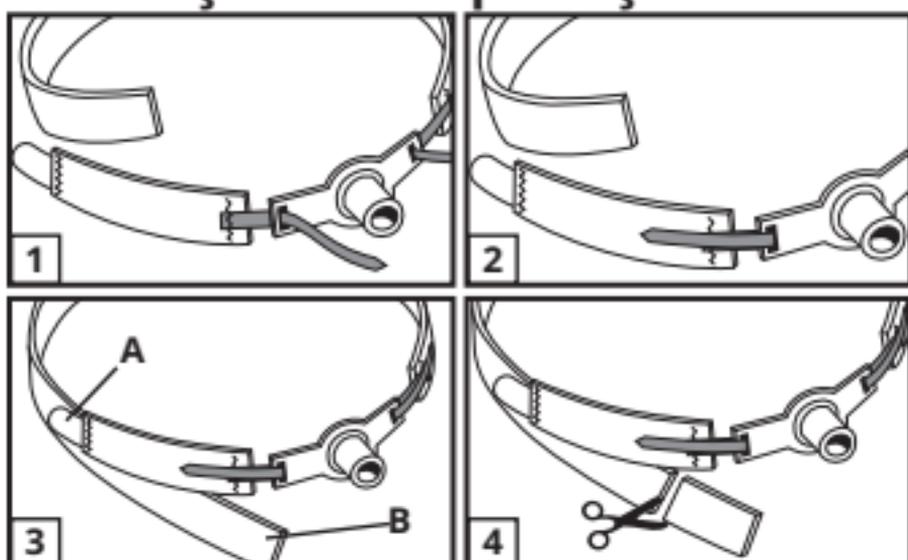

1. Enfie as presilhas de aperto compridas e estreitas através das flanges na placa que cobre a traqueia.
2. Passe as presilhas sobre a flange e prenda à cinta de fixação.
3. Prenda a presilha de aperto da secção curta (**A**) à secção comprida (**B**) da cinta de fixação. Regule para obter o comprimento ou a compressão apropriado(a).
4. Apare o material em excesso (**apenas B**) para obter o comprimento adequado.

Atenção

Utilizar apenas em instalações de cuidado de saúde com supervisão. Controlar para evitar o desengate inadvertido. Não apare as presilhas de aperto.

Troque o suporte todos os dias ou com mais frequência, se necessário. Troque após o banho do doente.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

