


Soportes para Tubos de Traqueostomía

Instrucciones de Aplicación

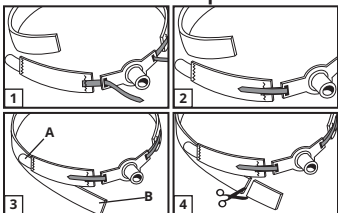

1. Pasar las lengüetas de sujeción angostas y alargadas a través de los orificios de las pestañas del dispositivo traqueal.
2. Una vez pasadas las lengüetas a través de las pestañas, tirar de ellas hacia atrás y fijarlas a la tirilla.
3. Asegurar la lengüeta de fijación del fragmento corto (A) al fragmento largo de la tirilla (B). Ajustar a la longitud y compresión apropiadas.
4. Recortar el exceso de material (B solamente) para lograr el largo adecuado.

Precauciones

Utilizar sólo si el paciente se encuentra en una unidad de cuidados supervisados. Controlar para evitar el desprendimiento accidental. No recortar las lengüetas de sujeción.

Cambiar el soporte a diario o con más frecuencia si es necesario. Cambiar después de bañar al paciente.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar la prenda, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

