


Hållare för Trakeostomitub

Appliceringsanvisningar

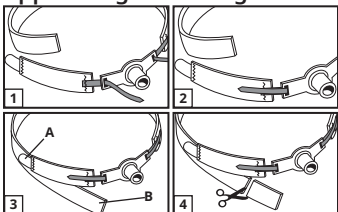

1. Trä de långa, smala fästflikarna genom flänsarna på trakeostomiplattan.
2. För flikarna tillbaka över flänsarna och fäst dem mot halsremmen.
3. Sätt fast den korta halsremsdelens fästflik (**A**) på den långa halsremsdelen (**B**). Justera till korrekt längd eller kompression.
4. Klipp av överflödigt material (**endast på B**) så att längden blir korrekt.

Obs!

Ska endast användas i vårdmiljö med övervakning. Övervaka produkten så att oavsiktlig lossning förhindras. Trimma inte fästflikarna.

Byt hållaren dagligen eller oftare om så krävs. Byt hållaren efter att patienten badat.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

