


Dale®

Medical Products

อุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจ

วิธีการใช้งาน

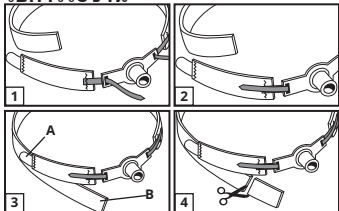

1. สอดแถบรัดผ่านรูด้านข้างฐานจากด้านปลายยาวและ
แถบของแถบรัดของท่อช่วยหายใจ
2. ดึงแถบริดวกกลับมาเหนือรูและยึดเข้ากับห่วงยึดคอ
3. ยึดแถบรัดด้านสั้น (A) เข้ากับด้านยาวของห่วงยึดคอ
(B) ปรับความยาวหรือความตึงกระชับให้เหมาะสม
4. ตัดวัสดุส่วนที่เกิน (เฉพาะส่วน B เท่านั้น) ทิ้งไปให้
เหลือแต่ความยาวที่พอเหมาะ

ข้อควรระวัง

ควรใช้ภายใต้การดูแลที่จัดเอาไว้เท่านั้น ควรเฝ้าสังเกต
เพื่อป้องกันอุปกรณ์หลุดโดยบังเอิญ
อย่าตัดแถบรัดส่วนเกาะเกี่ยว

เปลี่ยนอุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจวันละครั้งหรือบ่อยกว่า
ตามที่จำเป็น เปลี่ยนหลังจากผู้ป่วยอาบน้ำ

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical
Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

