


Trakeostomi Kanülü Tutucuları Uygulama Talimatı

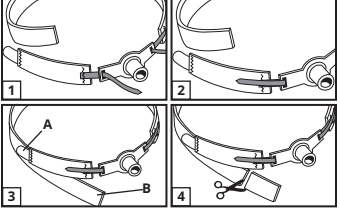

1. Uzun ve ince tutturucu şeritleri trakeal plakadaki kanatlardan geçirin.
2. Şeritleri kanat üzerinden geri getirip boyun bandına tutturun.
3. Kısa kısmın (A) şeridini uzun boyun bandı kısmına (B) sabitleyin. Uygun uzunluğa ve sıklığa ayarlayın.
4. Uygun uzunluk elde etmek için fazla materyali kısaltın (**sadece B**).

Dikkat

Sadece gözetim altındaki bakım ortamlarında kullanın. Kazayla yerinden çıkmasını önlemek için izleyin. Tutturucu şeritlerini kısaltmayın.

Tutucuyu her gün veya gerekirse daha sık değiştirin. Hasta banyo yaptıktan sonra değiştirin.

Tek hastada kullanılmak üzere. Tek kullanımlıktır.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

