

## Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

### Stabilock Houder Voor Endotracheale Tubes

geschikt voor endotracheale tubes van 7,0 mm tot 10,0 mm

**Inhoud:** 1 van elk - halsband; klevende basis 273

#### Instructies voor het Aanbrengen

1. Reinig de tube. Laten drogen.
2. Breng de klevende basis aan (A1-3). Volg de aanwijzingen op de verpakking van 273.
3. Druk de halsband op de klittenbandhaakjes van de basis en zorg daarbij dat het tubekanaal op één lijn ligt met de endotracheale tube. (B)
4. Open de bevestigingsglijpjes aan beide uiteinden van de halsband en wikkel de band net onder de oren om het hoofd. Maak de bevestigingsglijpjes aan de buitenkant van de halsband vast. (C)
5. Zet de tube vast in het tubekanaal
  - wikkel sterke tape eenmaal om de tube op de plaats waar het kanaal de tube zal bedekken
  - druk het kanaal omlaag over de tube
  - wikkel tape om de tube en het kanaal (D)

Andere wijze van tappen:

- druk het kanaal op de tube
- wikkel sterke tape nauwsluitend rond de tube en het kanaal. **Doe dit tot minstens 2,5 cm voorbij het uiteinde van het kanaal (D)**

6. Controleer of de halsband goed vastzit en stel de bevestigingsglijpjes zo nodig opnieuw af.

Vervang de tape indien nodig.

Vervissel de klevende basis na 3 dagen of sneller indien nodig.

#### Verwijderen

De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen.






#### Tube Opnieuw Positioneren

Open de bevestigingsglijpjes. Houd de klevende basis stevig vast terwijl u de halsband van de basis losmaakt. Positioneer de tube opnieuw. Druk hem opnieuw op de basis en maak de bevestigingsglijpjes vast.

Om verzuring of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het product aan te brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.

Dale **beveelt aan de endotracheale tube vaak opnieuw te positioneren** om door aanhoudende druk veroorzaakt letsel aan de lippen en onderliggende weefsels te helpen voorkomen.

Dale **beveelt ten zeerste aan de slangen van het beatmingsstoel te ondersteunen** om de druk op het gezicht van de patiënt te verminderen.

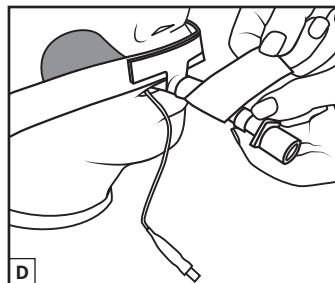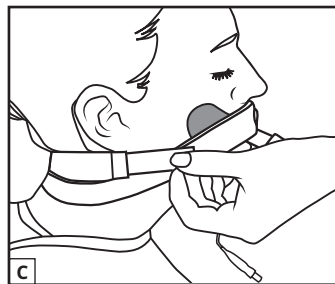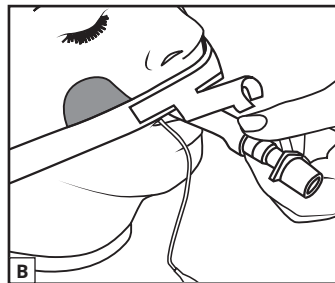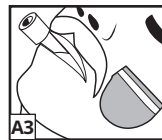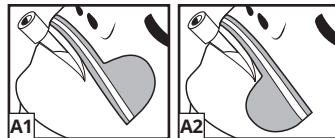

#### Handige Checklist voor Succesvol Aanbrengen

- ✓ **Prepareer** de huid iedere keer dat de klevende basis wordt aangebracht
- ✓ **Positioneer** de klevende basis direct boven de liplijn
- ✓ **Wikkel sterke tape strak** rond het kanaal en de tube
- ✓ **Zorg** dat de tape minstens 2,5 cm voorbij het kanaal rond de tube is gewikkeld
- ✓ **Verwijder** de klevende basis voorzichtig om beschadiging van de huid te minimaliseren
- ✓ **Ondersteun** de slangen van het beatmingsstoel

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

En videofilmje over het aanbrengen van de beha vindt u op [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.



# Dale®

Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)