

## Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

### Stabilock Support de Sonde Endotrachéale

convient aux sondes endotrachéales de 7,0 à 10,0 mm

**Contenu:** 1 de chaque - collier; 273 Base adhésive

#### Instructions pour l'Application

1. Nettoyez la sonde. Laissez sécher.
  2. Appliquez la base adhésive (A1-3). Suivre les instructions figurant sur l'emballage du 273.
  3. Pressez le collier sur la portion « crochets » de la base en veillant à ce que le porte-sonde soit bien aligné sur la sonde endotrachéale. (B)
  4. Ouvrez les languettes d'attache qui se trouvent aux extrémités du collier et faites passer le collier autour de la tête juste en dessous des oreilles. Sécurisez les languettes d'attache sur l'extérieur du collier. (C)
  5. Attachez la sonde au porte-sonde.
    - enroulez un ruban adhésif fort 1x autour de la sonde, à l'endroit où le porte-sonde recouvrira la sonde.
    - pressez le porte-sonde au-dessus de la sonde
    - enroulez le ruban autour de la sonde et du porte-sonde (D)
- Autre méthode possible pour appliquer le ruban:
- appuyez sur le porte-sonde pour l'enfoncer sur la sonde
  - enroulez solidement le ruban adhésif fort autour de la sonde et du porte-sonde. **Enroulez le ruban au minimum 2,5 cm au-delà de l'extrémité du porte-sonde (D)**

6. Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes d'attache selon les besoins.

Remplacez le ruban selon les besoins.

Changez la base adhésive au bout de trois jours ou plus tôt si nécessaire.

#### Retrait

Retirez délicatement l'adhésif pour éviter un trauma de la peau.

#### Repositionnement de la Sonde

Ouvrez les languettes d'attache. Maintenez la base adhésive en place tout en retirant le collier de la base. Repositionnez la sonde. Pressez-la contre la base et attachez les languettes d'attache.

Pour éviter l'ulcération ou le déchirement de la peau du patient et de son état médical avant l'application. Surveillez quotidiennement ou plus souvent.

Dale **recommande de repositionner souvent la sonde endotrachéale** pour aider à prévenir les blessures aux lèvres et aux tissus sous-jacents dues à une pression non relâchée.

Dale **recommande fortement de soutenir la sonde du ventilateur** pour réduire la pression sur le visage du patient.

#### Liste de Vérification Pratique pour Réussir l'Application

- ✓ **Préparez** la peau chaque fois que vous appliquez la base adhésive
- ✓ **Positionnez** la base adhésive directement au-dessus de la lèvre
- ✓ **Enroulez solidement** un ruban adhésif fort autour du porte-sonde et de la sonde
- ✓ **Assurez-vous** de couvrir la sonde avec le ruban adhésif en dépassant le porte-sonde d'au moins 2,5 cm
- ✓ **Retirez** délicatement la base adhésive pour minimiser les lésions cutanées
- ✓ **Soutenez** la tubulure du ventilateur






À usage unique. Jetable.

Pour un vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel.

Brevet [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

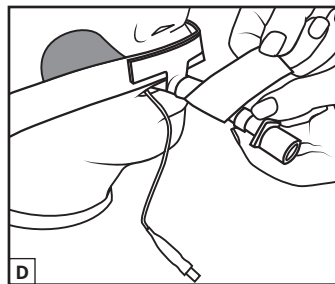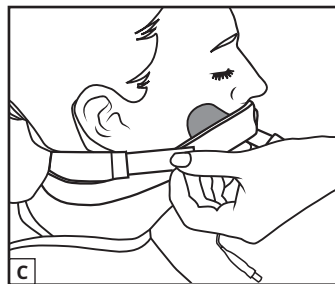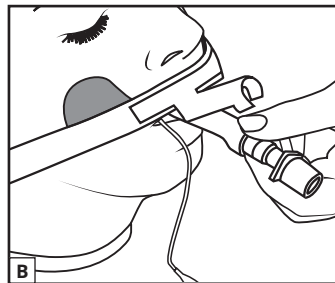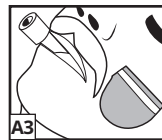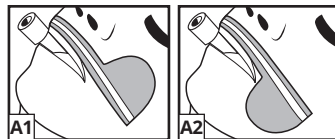

# Dale®

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)