

Stabilock Endotrachealtubushalter

passend für Endotrachealtuben der Größen 7,0–10,0mm

Inhalt: Je ein Nackenband, ein 273 Klebestreifen

Anwendung

1. Tubus säubern und trocken lassen.
2. Klebestreifen aufbringen (A1-3). Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung 273.
3. Nackenband auf dem Hakenteil am Klebestreifen drücken und sicherstellen, dass der Tubuskanal mit dem Endotrachealtubus ausgerichtet ist. (B)

4. Die an beiden Enden des Nackenbandes befindlichen Befestigungslaschen öffnen und das Nackenband unmittelbar unterhalb der Ohren um den Kopf legen. Befestigungslaschen an der Außenseite des Nackenbandes sichern. (C)

5. Tubus im Tubuskanal fixieren
 - Starkes Klebeband 1x an der Stelle um den Tubus wickeln, an der der Kanal den Tubus abdecken wird
 - Kanal nach unten über den Tubus drücken
 - Klebeband um Tubus und Kanal wickeln (D)

Alternative Fixierung:

- Kanal auf den Tubus drücken
- Starkes Klebeband fest um Tubus und Kanal wickeln. **Klebeband mindestens 2,5 cm über das Ende des Kanals hinaus wickeln (D)**

6. Der sichere Sitz des Nackenbandes wird durch bedarfsweises Anpassen der Befestigungslaschen sichergestellt.

Band nach Bedarf auswechseln.

Klebestreifen nach 3 Tagen oder ggf. früher auswechseln.

Entfernen

Klebestreifen vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden.

Repositionierung des Tubus

Befestigungslaschen öffnen. Klebestreifen festhalten und Nackenband vom Klebestreifen abziehen. Tubus neu positionieren. Nackenband wieder auf den Klebestreifen drücken und Befestigungslaschen schließen.

Zur Vermeidung von Hautulzerationen oder Hautrissen sind die Haut und der Gesundheitszustand des Patienten vor Anbringen dieses Produkts zu beurteilen. Täglich oder ggf. auch häufiger prüfen.

Dale **empfiehlt eine häufige Neupositionierung des Endotrachealtubus**, um eine Verletzung der Lippen und des darunterliegenden Gewebes durch andauernden Druck zu vermeiden

Dale **empfiehlt ausdrücklich, den Beatmungstubus abzstützen**, um den Druck auf das Gesicht des Patienten zu reduzieren.

Praktische Checkliste für die erfolgreiche Anwendung






- ✓ Haut bei jeder Anbringung des Klebestreifens **vorbereiten**.
- ✓ Klebestreifen direkt über der Lippe **positionieren**.
- ✓ Starkes Klebeband **spiralförmig** 2,5 cm den Kanal und den Tubus **wickeln**.
- ✓ Das Klebeband **muss** mindestens 2,5 cm über den Kanal hinaus um den Tubus gewickelt sein.
- ✓ Klebestreifen vorsichtig **abziehen**, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- ✓ **Beatmungstubus abstützen**.

Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt. Einwegartikel.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com
Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

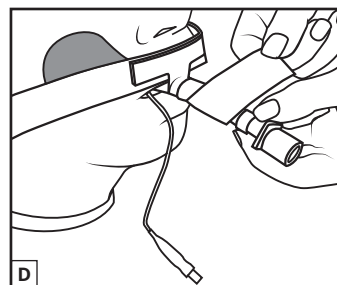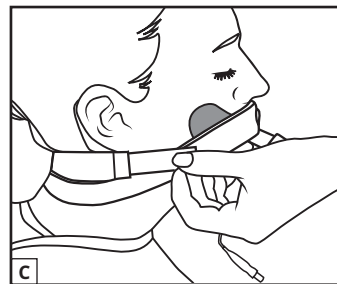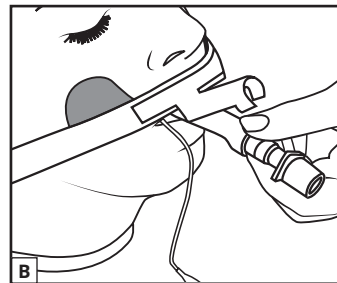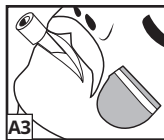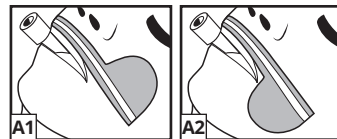

Dale[®] Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale[®]

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)