

## Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

### Stabilock Στήριγμα ενδοτραχειακού σωλήνα

Κατάλληλο για ενδοτραχειακού σωλήνες 7,0- 10,0 mm

**Περιεχόμενα:** 1 από έκαστο - περιλαίμιο, αυτοκόλλητη βάση 273

#### Οδηγίες εφαρμογής

1. Καθαρίστε τον σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.
2. Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση (A1-3). Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία 273.
3. Πιέστε το περιλαίμιο πάνω στην τραχιά περιοχή της αυτοκόλλητης βάσης, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε το κανάλι υποδοχής του ενδοτραχειακού σωλήνα με τον ενδοτραχειακό σωλήνα.(B)
4. Ανοίξτε τις γλωττίδες ασφάλισης που υπάρχουν στα δύο άκρα του περιλαΐμιου και τυλίξτε το περιλαίμιο γύρω από το κεφάλι, ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Στερεώστε τις γλωττίδες ασφάλισης στην εξωτερική πλευρά του περιλαΐμιου.(C)
5. Στερεώστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα στο κανάλι του σωλήνα
  - τυλίξτε μια ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία 1 φορά γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα, στην περιοχή όπου το κανάλι θα καλύπτει τον σωλήνα
  - πιέστε το κανάλι προς τα κάτω, πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα
  - τυλίξτε την ταινία γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα και το κανάλι (D)

Εναλλακτική μέθοδος συγκράτησης με ταινία:

- πιέστε το κανάλι πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα
- τυλίξτε σφικτά με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία τον ενδοτραχειακό σωλήνα μαζί με το κανάλι. **Συνεχίστε να τυλίγετε την ταινία γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα κατά τουλάχιστον 2,5 cm πέρα από την άκρη του καναλιού (D)**

6. Βεβαιωθείτε ότι το περιλαίμιο έχει στερεωθεί καλά, ξαναρυθμίζοντας τις γλωττίδες ασφάλισης όσο χρειάζεται.

Αλλάξτε την ταινία όποτε χρειάζεται.

Αλλάξτε την αυτοκόλλητη βάση μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν χρειάζεται.

#### Αφαίρεση

Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα.

#### Αλλαγή θέσης του σωλήνα

Ανοίξτε τις γλωττίδες ασφάλισης. Συγκρατήστε κάτω την αυτοκόλλητη βάση και αποκόλληστε το περιλαίμιο από τη βάση. Μετακινήστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα σε άλλη θέση. Πιέστε ξανά το περιλαίμιο πάνω στη βάση και στερεώστε τις γλωττίδες ασφάλισης.

Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά ή συχνότερα.

**Η Dale συνιστά να αλλάξετε συχνά τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα** ώστε να αποτραπεί τραυματισμός των χεριών και των υποκειμένων ιστών λόγω παρατεταμένης πίεσης.

**Η Dale συνιστά ιδιαίτερα να υποστηρίξετε ο σωλήνας αερισμού** ώστε να περιορίζεται η πίεση που ασκείται στο πρόσωπο του ασθενή.

#### Ευχρηστος κατάλογος ελέγχου για επιτυχή εφαρμογή

- ✓ Προετοιμάζετε το δέρμα κάθε φορά πριν εφαρμόσετε την αυτοκόλλητη βάση
- ✓ Τοποθετείτε την αυτοκόλλητη βάση ακριβώς πάνω από τη γραμμή του χείλους
- ✓ Τυλίξτε σφικτά και στερεοειδώς μια ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία γύρω από το κανάλι και τον σωλήνα
- ✓ Φροντίστε να τυλίξετε την αυτοκόλλητη ταινία γύρω του ενδοτραχειακού σωλήνα κατά τουλάχιστον 2,5 cm πέρα από το κανάλι
- ✓ Αφαιρέστε με ήπιες κινήσεις την αυτοκόλλητη βάση για να ελαχιστοποιήσετε την κάκωση του δέρματος
- ✓ Υποστηρίξετε τον σωλήνα αερισμού





Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστοτόπο [www.dalemedi.com](http://www.dalemedi.com)

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Διπλώμα ευρεσιτεχνίας [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Τα Dale & BreezeLock είναι εμπορικά σήματα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

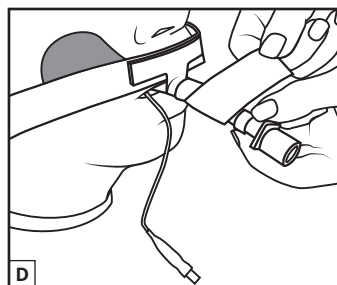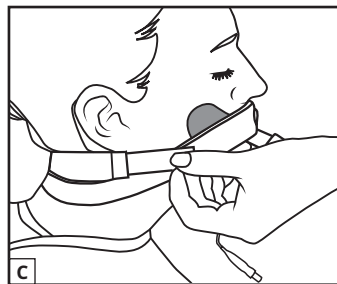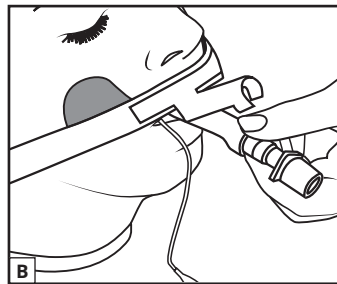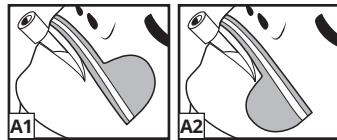

# Dale®

Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)