

Stabilock[®]

Fixador de Tubo Endotraqueal

encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm

Contém: 1 unidade de: cinta de fixação; base adesiva 273

Instruções de Aplicação

1. Limpe o tubo. Deixe-o secar.
2. Aplique a base adesiva (A1-3). Seguir as instruções da embalagem 273.
3. Prima a cinta de fixação na porção em gancho da base e não deixe de certificar-se de que o Canal da Tubulação esteja alinhado com o tubo endotraqueal.(B)
4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação.(C)
5. Prenda o tubo no Canal da Tubulação
 - passe uma fita adesiva forte 1 vez em torno do tubo no ponto em que o Canal cobrirá o tubo
 - prima o Canal para baixo sobre o tubo
 - passe a fita em torno do tubo e do Canal (D)

Método alternativo para a colocação da fita:

- prima o Canal sobre o tubo
- passe firmemente uma fita adesiva forte em torno do tubo e do Canal. Passe a fita no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do fim do Canal (D)

6. Certifique-se de que a cinta de fixação está firme ao reajustar as linguetas de fecho, como necessário.

Troque a fita, como necessário.

Troque a Base Adesiva depois de 3 dias ou menos, se necessário.

Remoção

O adesivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele.

Reposicionamento do Tubo

Abra as linguetas de fecho. Mantenha a Base Adesiva premida enquanto tira a cinta de fixação da base. Reposicione o tubo. Prima de volta na base e prenda as linguetas de fecho.

A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do paciente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência

A Dale **recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência** para ajudar a evitar lesões nos lábios e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão constante.

A Dale **recomenda com veemência que a tubulação do ventilador seja apoiada** para reduzir a pressão sobre a face do paciente.

Lista de Controle para uma Aplicação Bem-sucedida

- ✓ **Aplique o preparado para a pele** todas as vezes que a Base Adesiva seja aplicada
- ✓ **Posicione** a Base Adesiva directamente acima da linha do lábio
- ✓ **Passe firmemente e em espiral** uma fita adesiva forte em torno do Canal e do tubo
- ✓ **Passe a fita em torno** do tubo no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do Canal.
- ✓ **Remova a Base Adesiva** com cuidado para minimizar danos à pele
- ✓ **Apoie a tubulação do ventilador**


Para a utilização num único doente. Descartável.

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com


Não fabricado com látex de borracha natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.

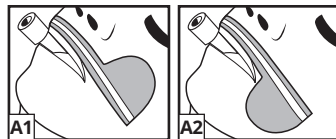


A1

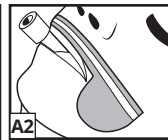


A2




A3

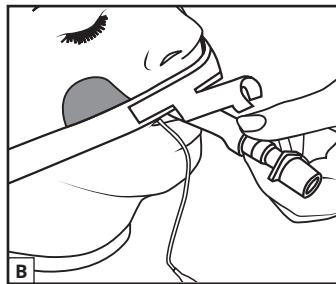

B

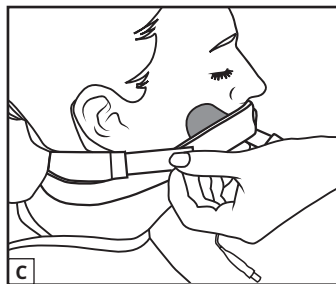

C

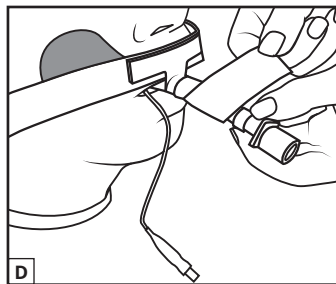

D

Dale[®]

Stabilock

Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale[®]

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)