

Dale®

Stabilock

Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

Stabilock

Endotrakealtubhållare

passar till endotrakealtubstorlekar 7,0-10,0 mm

Innehåll: 1 st: nackband, 273 självhäftande bas

Appliceringsanvisningar

1. Rengör tuben. Låt den torka.
 2. Applicera den självhäftande basen (A1-3). Följ anvisningarna på 273 förpackningar.
 3. Tryck fast nackbandet på basens hakdel och se till att tubkanalen är i linje med endotrakealtuben. (B)
 4. Öppna fästflikarna vid nackbandets båda ändrar och vira bandet runt huvudet omedelbart under öronen. Fäst fästflikarna på utsidan av nackbandet. (C)
 5. Gör fast tuben i tubkanalen
 - vira kraftig självhäftande tejp ett varv runt tuben på det ställe där kanalen kommer att täcka tuben
 - tryck ner kanalen över tuben
 - vira tejp runt tuben och kanalen (D)
- Alternativ tejpningsmetod:
- tryck fast kanalen på tuben
 - vira kraftig självhäftande tejp tätt runt tuben och kanalen. Vira tejpens minst 2,5 cm utanför kanalens ände (D)
6. Säkerställ att nackbandet sitter säkert genom att justera fästflikarna efter behov.

Byt ut tejpens efter behov.

Byt ut den självhäftande basen efter tre dagar eller tidigare om så behövs.

Borttagning

Den självhäftande basen ska tas av försiktigt så att huden inte skadas.

Omplacering av Tuben

Öppna fästflikarna. Håll den självhäftande basen nedtryckt medan du skalar av nackbandet från basen. Placera om endotrakealtuben. Tryck tillbaka nackbandet på basen och säkra fästflikarna.

Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudsår eller hudrifter undviks. Övervaka området en gång per dag eller oftare.

Dale rekommenderar att endotrakealtuben placeras om ofta för att förhindra skada på läpparna och underliggande vävnader orsakad av det konstanta trycket.

Dale rekommenderar starkt att ventilatorslangen stötts så att trycket på patientens ansikte minskas.

Praktisk Checklista för Lyckad Applicering

- ✓ Rengör huden varje gång den självhäftande basen appliceras
- ✓ Placera den självhäftande basen omedelbart ovanför läpplinjen
- ✓ Spirälvira kraftig självhäftande tejp tätt runt kanalen och tuben
- ✓ Var noga med att vira tejp på tuben minst 2,5 cm utanför kanalen
- ✓ Avlägsna den självhäftande basen varsamt för att minimera hudskada
- ✓ Stötta ventilatorslangen

För användning till en enskild patient. Engångsprodukt.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com


Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patent www.dalemed.com/patents


Dale är ett registrerat varumärke som tillhör

Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och

Storbritannien.

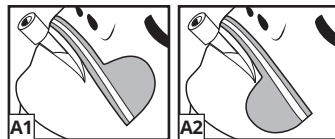


A1

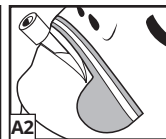


A2




A3

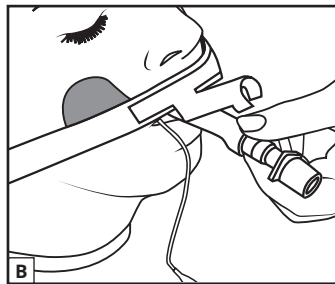

B

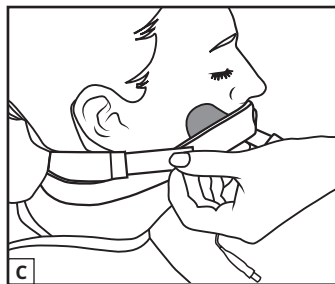

C

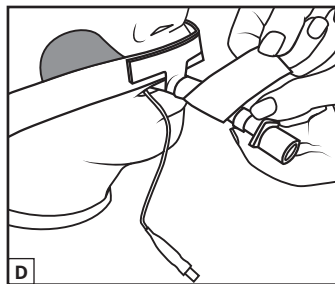

D

