

Stabilock Endotrakeal Tüp Tutucu

7,0-10,0 mm büyüklüğünde endotrakeal tüpler için uygundur
İçeriği: Birer adet - boyun bandı; 273 Yapışkan Taban

Uygulama Talimatı

1. Tüpü temizleyin. Kurumasını bekleyin.
2. Yapışkan tabanı uygulayın (A1-3). 273 paket üzerindeki talimatları takip edin.
3. Boyun bandını tabanın kanca kısmı üzerine bastırıp Tüp Kanalının endotrakeal tüp ile hizalandığından emin olun.(B)
4. Boyun bandının her iki ucunda bulunan tutturucu şeritleri açın ve bandı kulakların hemen altından baş etrafında sarın. Tutturucu şeritleri boyun bandının dışına tutturun.(C)
5. Tüpü Tüp Kanalında sabitleyin
 - Kanalın tüpü örteceği kısımda tüpün etrafına 1 kat kuvvetli yapışkan bant sarın
 - Kanalı tüpün üzerine aşağı bastırın
 - Tüpün ve Kanalın etrafını bantla sarın (D)

Alternatif Bantlama Yöntemi:

- Kanalı tüpün üzerine bastırın
 - Tüp ve Kanalın etrafına kuvvetli yapışkan bandı sıkıca sarın. Bandı Kanal ucundan sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde sarın (D)
6. Tutturucu şeritleri gerektiği şekilde tekrar ayarlayarak boyun bandı güvenliğini sağlayın.

Bandı gerektiğe değiştirin.

Yapışkan Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için yapışkan dikkate çıkarılmalıdır

Tüpün Tekrar Konumlandırılması

Tuturucu şeritleri açın. Boyun bandını tabandan soyarak ayırırken Yapışkan Tabanı yerinde tutun. Tüpü tekrar konumlandırın. Tekrar tabanın üzerine itip tutturucu şeritleri sağlamca tutturun.

Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel sağlık durumunu değerlendirin. Günlük olarak veya daha sık kontrol edin.

Dale dudaklar ve alttaki dokuların sürekli basınç nedeniyle zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için **endotrakeal tüpün sıkı sıkı yeniden konumlandırılmasını önermektedir.**

Dale hastanın yüzü üzerindeki basıncı azaltmak için **ventilatör tüpünün desteklenmesini kuvvetle önermektedir.**

Başarılı Uygulama İçin Kolay Kontrol Listesi

- ✓ Her Yapışkan Taban uygulandığında cildi **hazırlayın**
- ✓ Yapışkan Tabanı dudak hattının hemen üzerinde **konumlandırın**
- ✓ Kanal ve tüp etrafında yapışkan bandı sıkıca **spiral şekilde sarın**
- ✓ Bandı tüp Kanalından sonra en az 2,5 cm uzanacak şekilde **sarın**
- ✓ Yapışkan Tabanı cilt hasarını en aza indirmek için **yavaşça çıkarın**
- ✓ Ventilatör tüpünü **destekleyin**





Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngilterede tescilli ticari markasıdır.

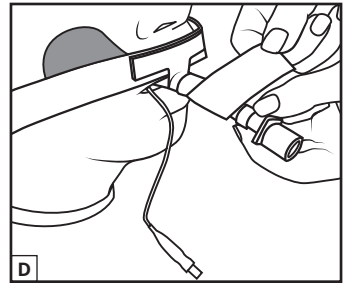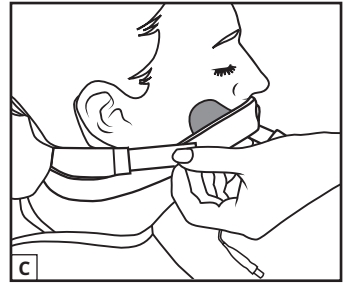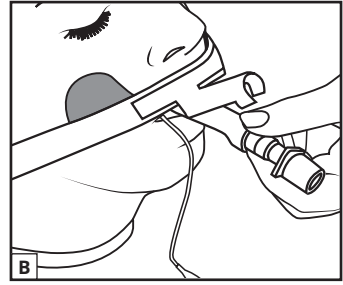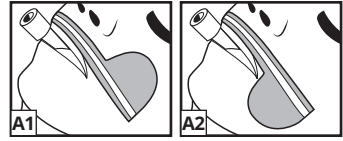

Dale® Stabilock Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale®

Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-310715 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)