


## Klæbebund

### Brugsanvisning

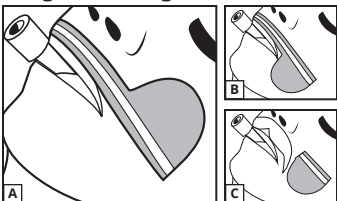

1. Smør hudplejeprodukt på.
2. Tag papiret af klæbebunden og anbring den på det ønskede sted (A-C). Klip til efter behov.

Udskift klæbebunden efter 3 dage eller før, hvis det er nødvendigt.

Tilses dagligt eller oftere.

### Aftagning

Klæbebunden skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume.

Patientens hud og medicinske tilstand skal vurderes inden anbringelse for at forhindre ulceration eller ruptur af huden.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

