


Klevende Basis

Instructies voor het Aanbrengen

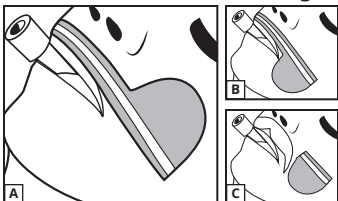

1. Gebruik een huidbeschermingsdoekje om bescherming op de huid aan te brengen.
2. Verwijder de steunlaag en breng de klevende basis op de gewenste plaats aan (**A-C**). Zo nodig bijknippen.

Verwissel de basis na 3 dagen of zo nodig sneller.

Voer dagelijks of vaker een controle uit.

Verwijderen

De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen.

Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het product aan te brengen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

