


## Tarttuva Alusta

### Käyttöohjeet

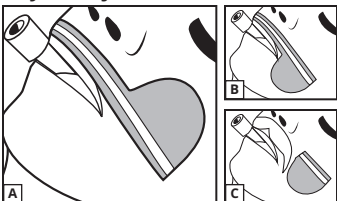

1. Valmistele iho ihonsuoja-aineella.
2. Irrota taustapaperi ja aseta tarttuva alusta haluttuun kohtaan (A-C). Leikkaa tarpeen mukaan.

Vaihda alusta 3 päivän jälkeen tai tarpeen mukaan aiemmin.

Seuraa päivittäin tai useammin.

### Poistaminen

Tarttuva alusta tulee irrottaa varovasti, jotta iho ei vahingoitu.

Arvioi potilaan iho ja terveydentila ennen kiinnittämistä haavaumien ja ihon repeämisen estämiseksi.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Kiinnityksessä opastava video on katsottavissa osoitteessa [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com).

Dalen lääketieteellisiä tuotteita on saatavana lääketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyjiltä.

Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Dale on Dale Medical Products, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

