


Base Adhésive

Instructions pour l'Application

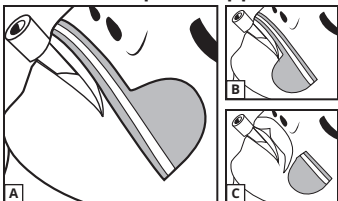

1. Appliquez une solution de préparation de la peau.
2. Retirez la bande antiadhésive et placez la Base adhésive à l'endroit désiré (A-C). Coupez suivant les besoins.

Changez la base au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.

Surveillez quotidiennement ou plus souvent.

Retrait

Retirez délicatement l'adhésif pour ne pas risquer de traumatiser la peau.

Pour éviter l'ulcération ou le déchirement de la peau, faites une évaluation de la peau du patient et de son état médical avant l'application.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l'application, veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

