


Klebestreifen

Anwendung

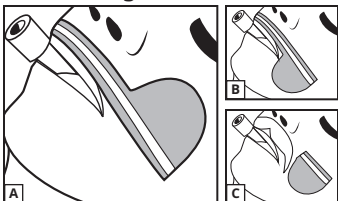

1. Hautpräparation auftragen.
2. Schutzstreifen abziehen und Klebestreifen auf die gewünschte Stelle platzieren (**A-C**). Nach Bedarf zuschneiden.

Klebestreifen nach 3 Tagen oder ggf. früher wechseln.

Täglich oder ggf. auch häufiger prüfen.

Entfernen

Klebestreifen vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Hautulzerationen oder Hautrissen sind die Haut und der Gesundheitszustand des Patienten vor Anbringen dieses Produkts zu beurteilen.

Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.
Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland