


## Ragasztós Tartóaljzat

### Alkalmazási Utasítások

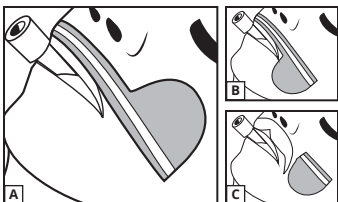

1. Helyezzen fel bőrvédő kendőt.
2. Távolítsa el a védőszalagot, és helyezze a ragasztós tartóaljzatot a kívánt helyre (A-C). Vágjon le belőle, ha szükséges.

Három nap múltán cserélje le az aljzatot, vagy gyakrabban, ha szükséges.

Naponta vagy ennél gyakrabban ellenőrizze a beteg bőrének állapotát.

### Eltávolítás

A bőrtrauma elkerülésének érdekében óvatosan kell eltávolítani a ragasztószalagot.

A bőr elfekélyesedésének vagy beszakadásának elkerülése érdekében mérje fel a beteg bőrének állapotát, valamint a beteg egészségügyi állapotát, mielőtt a tartószalagot felhelyezné.

Egyetlen betegen való alkalmazásra. Eldobható.

Az alkalmazást bemutató videóért látogasson el a [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) webhelyre.

A Dale gyógyászati termékek elérhetők a kedvelt kórházi-/gyógyászati eszköz-forgalmazójától.

Nem természetes latex gumiból készült.

A Dale a Dale Medical Products, Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban, az EU-ban és az Egyesült Királyságban.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

