


粘着ベース

使用方法

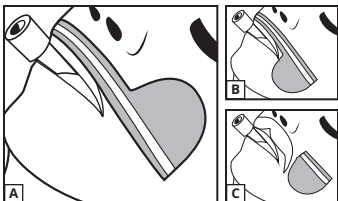

1. 肌に準備薬を塗ります。
2. ライナーを剥がし、粘着ベースを適切な部位に貼り付けます (A-C)。必要な場合は余分な箇所を切り取ります。

ベースは3日以内または必要な場合はもっと早く交換してください。

最低1日1回は確認してください。

取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけて粘着テープを取り外してください。

皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

