


접착 베이스

착용 방법

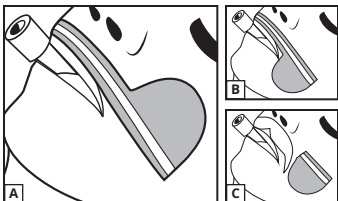

1. 피부 프레임을 바르십시오.
2. 라이너를 제거하고 접착 베이스를 원하는 위치 (A-C)에 붙이십시오. 필요한 경우 끝 부분을 잘라 내어 다듬으십시오.

3일 후에, 또는 필요하면 더 빨리 베이스를 바꾸십시오.

매일 또는 더 자주 모니터링을 하십시오.

제거

피부 외상을 방지하기 위해 접착 베이스를 주의하여 제거해야 합니다.

피부 궤양 또는 피부 열상을 방지하기 위해, 도포하기 전에 환자 피부 및 의학적 상태를 평가하십시오.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

Dale 의료 제품들은 이용하시는 병원/의료용품 공급상으로부터 구입하실 수 있습니다.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale은 미국, EU 및 영국에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

