


Base Adesiva

Instruções de Aplicação

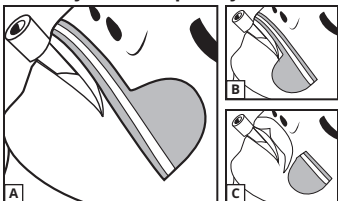

1. Aplique o preparado para a pele.
2. Remova o protector e posicione a Base Adesiva no local desejado (A-C). Corte o excesso na medida necessária.

Troque a base depois de 3 dias, ou menos se necessário.

Monitore diariamente ou com mais frequência.

Remoção

O adesivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele.

A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do paciente antes da aplicação.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

