


Base Adhesiva

Instrucciones de Aplicación

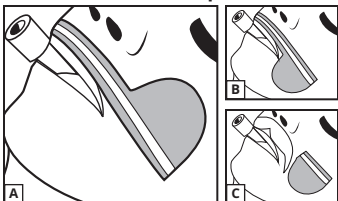

1. Aplique el producto de preparación de la piel.
2. Quite el revestimiento y coloque la base adhesiva en el lugar deseado **(A-C)**. Recórtela según sea necesario.

Cambie la base al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

Inspeccione por lo menos una vez por día.

Cómo Retirar

Despegue el producto adhesivo cuidadosamente para no lesionar la piel.

Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y las afecciones médicas del paciente antes de aplicar el producto.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar la prenda, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

