


## Självhäftande Bas

### Appliceringsanvisningar

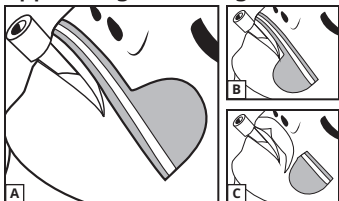

1. Applicera en hudbarriärprodukt.
2. Ta av skyddspapperet och placera den självhäftande basen på önskad plats (A-C). Trimma efter behov.

Byt ut basen efter tre dagar eller tidigare om så behövs.

Övervaka området en gång per dag eller oftare.

### Borttagning

Den självhäftande basen ska tas av försiktigt så att huden inte skadas.

Bedöm patientens hud och medicinska tillstånd före applicering, så att hudår eller hudrifter undviks.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

