


ฐานติดผิว

วิธีการใช้งาน

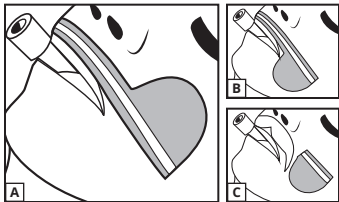

1. เช็ดผิวหนังด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิวหนัง
2. ลอกวัสดุชั้นฐานติดผิวออกและวางลงในจุดที่ต้องการ (A-C) ตัดแต่งขอบตามที่จำเป็น

เปลี่ยนฐานหลังใช้แล้ว 3 วัน หรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น นอกจากนี้ให้ติดตามดูสภาพการใช้งานทุกวันหรือให้บ่อยขึ้น

การถอดออก

ลอกฐานติดผิวด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ผิวหนัง

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแผลเปื่อยที่ผิวหนัง หรือ ผิวหนังฉีกขาด ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสอบสภาพผิวของผู้ป่วยและอาการอื่น ๆ ทางการแพทย์

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

