


Yapışkan Taban

Uygulama Talimatı

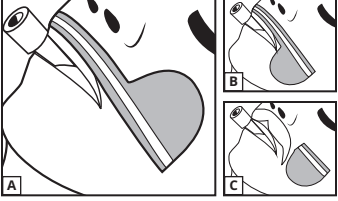

1. Cilt hazırlık amaçlı ıslak mendil uygulayın.
2. Lineri çıkarın ve Yapışkan Tabanı istenen konuma yerleştirin (A-C). Gerektiği şekilde kısaltın.

Tabanı 3 günden sonra veya gerekirse daha erken değiştirin.

Günlük olarak veya daha sık kontrol edin.

Çıkarma

Cilt travmasını önlemek için yapışkan dikkatle çıkarılmalıdır.

Cilt ülserasyonlarını veya ciltte açılmayı önlemek için uygulama öncesinde hastanın cilt durumunu ve genel durumunu değerlendirin.

Tek hastada kullanılmak üzere. Tek kullanımlıdır.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

