

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products






BreezeLock® Držač Endotrahealne Kanile

Za endotrahealne kanile veličine 7,0-10,0mm

Sadržaj: po jedan primjerak ovrtnik; samoljepljiva podloga 273; medicinska ljepljiva traka

Upute za Primjenu

- Očistite kanilu. Ostavite da se osuši.
- Zalijepite samoljepljivu podlogu. (A) Slijedite upute na pakiranju samoljepljive podloge 273.
- Utisnite ovrtnik na gornji dio samoljepljive podloge te pazite da je TRAKA centrirana iznad usta bolesnika. (B)
- Otvorite trake za pričvršćivanje na oba kraja ovrtnika te omotajte ovrtnik oko glave bolesnika neposredno ispod ušiju. Stegnite trake za pričvršćivanje s vanjske strane ovrtnika.
- Podignite KOPČU DALE. Postavite DRŽAČ KANILE preko endotrahealne kanile. Fiksirajte KOPČU DALE u točan položaj preko TRAKE i ovrtnika.
- Postupak lijepljenja kanile na DRŽAČ KANILE:
 - Kad je kanila u slobodnom položaju ispod DRŽAČA KANILE, jednom omotajte priloženu dugu samoljepljivu traku od 15 cm oko kanile. (C)
 - Utisnite DRŽAČ KANILE na kanilu.
 - Čvrsto omotajte ljepljivu traku spiralnim pokretom prema naprijed oko kanile i DRŽAČA KANILE. (D)
 - Dodatne mogućnosti: Omotajte ljepljivu traku najmanje 2,5 cm ispod kraja DRŽAČA KANILE..
- Dodatno fiksirajte ovrtnik podešavanjem traka za pričvršćivanje prema potrebi.
 - Prema potrebi mijenjajte ljepljivu traku na DRŽAČU KANILE.
 - Promijenite napravu nakon tri dana ili ranije ako je potrebno.
 - Procijenite stanje kože bolesnika i njegovo zdravstveno stanje prije primjene da se izbjegnu ulceracije ili pucanje kože. Napravu pregledajte jednom dnevno ili češće.

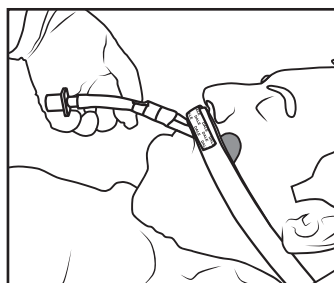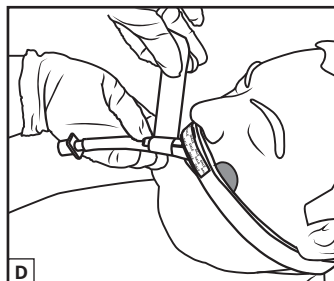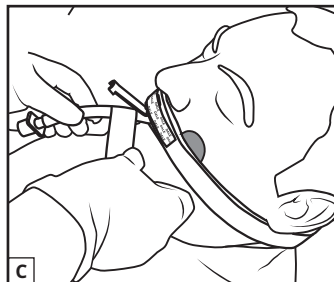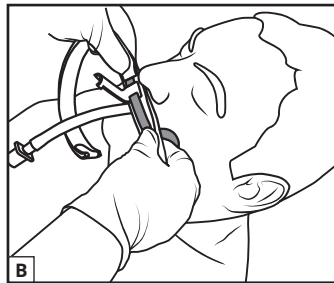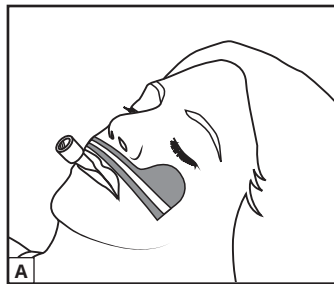

Premještanje Kanile

Držeći zalijepljeni DRŽAČ KANILE jednom rukom odvojite KOPČU DALE od TRAKE. Pomaknite DRŽAČ KANILE i premjestite kanilu na željeno mjesto. Utisnite KOPČU DALE natrag na traku i ovrtnik da biste fiksirali željeni položaj kanile.

Uklanjanje

Napravu je potrebno oprezno ukloniti da se izbjegnu ozljede kože. Ponovo premažite kožu ako će se postavljati druga naprava.

Dale **preporuča čestu promjenu položaja endotrahealne kanile** s ciljem sprječavanja ozljeda usnica i potkožnog tkiva zbog konstantnog pritiska.

Dale **strogo preporuča korištenje potpore za cijev respiratora kako bi se smanjio pritisak na lice bolesnika.**

Za uporabu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Za video o aplikaciji posjetite www.dalemed.com

Ne sadrži prirodni gumeni lateks.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale i BreezeLock registrirani su zaštitni znaci tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU i UK-u.

