

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale® Medical Products






BreezeLock® Holder Til Endotrakealtube

Passer til endotrakealtube str. 7,0-10,0 mm

Indhold: 1 af hver – halsrem; klæbebund 273; rulle tape

Brugsanvisning

1. Rens tuben. Lad den tørre.
2. Påfør klæbebunden. (A) Følg anvisningerne på emballagen til klæbebund 273.
3. Tryk halsremmen fast på den del af klæbebunden, hvor burrebåndet sidder og sørg for, at SPORET befinder sig midt over patientens mund. (B)
4. Åbn låsefligene i begge ender af halsremmen, og læg remmen rundt om hovedet lige under ørerne. Fastgør låsefligene på ydersiden af halsremmen.
5. Løft DALE OVERDÆKNING. Anbring KANALEN over endotrakealtuben. Tryk DALE OVERDÆKNING hen over SPORET og halsremmen, og fastgør den på sin plads.
6. Trin til tapening af tuben til KANALEN:
 - Med tuben hvilende frit under KANALEN vikles et stykke på 15 cm af det vedlagte tape 1 x rundt om tuben. (C)
 - Tryk TUBEKANALEN ned på tuben.
 - Vikl tapen forsvarligt rundt om tuben og KANALEN i en fremadgående cirkelbevægelse. (D)
 - Valgfrit: Vikl tapen mindst 2,5 cm ud over TUBEKANALENS ende.
7. Sørg for, at halsremmen sidder ordentligt ved at justere låsefligene efter behov.
 - Udskift tapen på KANALEN efter behov.
 - Udskift klæbebunden efter 3 dage, eller før hvis det er nødvendigt.
 - For at forhindre sår eller rifter på huden vurderes patientens hud og medicinske tilstand inden anbringelse. Efterses dagligt eller oftere.

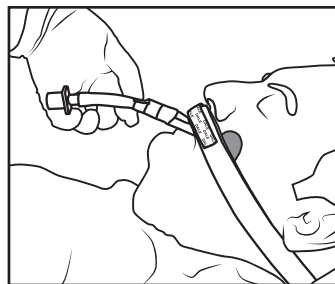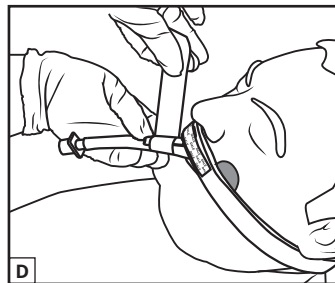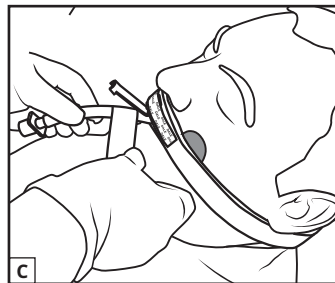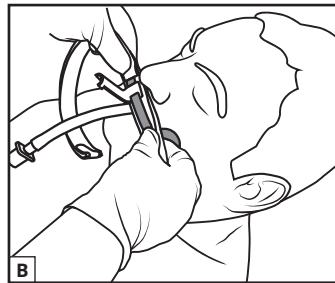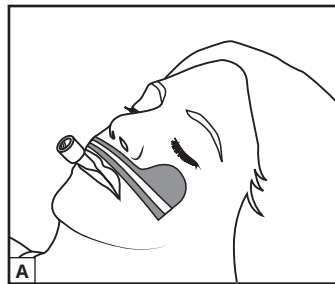

Justering af Tubens Position

Løft DALE OVERDÆKNING af SPORET, mens du holder den tapede KANAL med den ene hånd. Skub KANALEN for at flytte tuben hen på den ønskede placering. Tryk DALE OVERDÆKNING tilbage på SPORET og halsremmen for at fastgøre tubens placering.

Aftagning

Klæbebunden skal tages forsigtigt af for at undgå hudtraume. Kom skin-prep på igen, hvis der skal påsættes en ny klæbebund.

Dale anbefaler at flytte på endotrakealtuben ofte for at forhindre skade på læber og underliggende væv, der kan opstå pga. kontinuerligt tryk.

Dale anbefaler også kraftigt at støtte ventilationslangen for at reducere trykket mod patientens ansigt.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com Ikke fremstillet med naturgummilætex.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale & BreezeLock er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. I USA, EU og Storbritannien.

