

Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

Dale® Medical Products



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

Dale®

Medical Products

BreezeLock®






Houder Voor Endotracheale Tubes

geschikt voor endotracheale tubes van 7,0 mm tot 10,0 mm

Inhoud: 1 van elk – halsband; klevende basis 273; rol tape

Instructies voor het Aanbrengen

1. Reinig de tube. Laten drogen.
2. Breng de zelfklevende basis aan. (A) Volg de aanwijzingen op de 273-verpakking.
3. Druk de halsband op de klittenbandhaakjes van de zelfklevende basis en zorg daarbij dat de RAIL zich in het midden boven de mond van de patiënt bevindt. (B)
4. Open de bevestigingslijpjes aan beide uiteinden van de halsband en wikkel de band net onder de oren om het hoofd. Zet de bevestigingslijpjes op de buitenkant van de halsband vast.
5. Til de DALE-OVERLAY op. Plaats het KANAAL over de endotracheale tube. Druk de DALE-OVERLAY over de RAIL en halsband heen om alles goed op zijn plaats vast te zetten.
6. Ga als volgt te werk om de tube met tape aan het KANAAL vast te maken:
 - Terwijl de tube zich vrij onder het KANAAL bevindt, wikkel u 15 cm van de meegeleverde zelfklevende tape eenmaal om de tube. (C)
 - Druk het TUBEKANAAL omlaag op de tube.
 - Wikkel de tape stevig met een voorwaartse spiraalbeweging om de tube en het KANAAL. (D)
 - Optioneel: Wikkel de tape minstens 2,5 cm voorbij het uiteinde van het TUBEKANAAL.
7. Controleer of de halsband goed vastzit en stel de bevestigingslijpjes zo nodig opnieuw af.
 - Vervang de tape op het KANAAL indien nodig.
 - Vervang het hulpmiddel na 3 dagen of sneller indien nodig.
 - Om verzuring of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het hulpmiddel aan te brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.

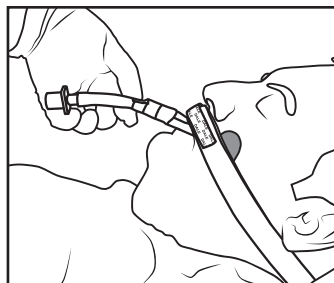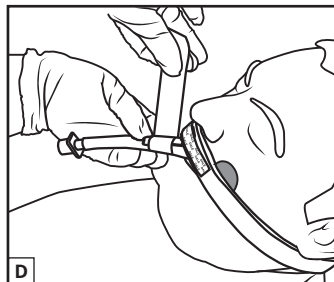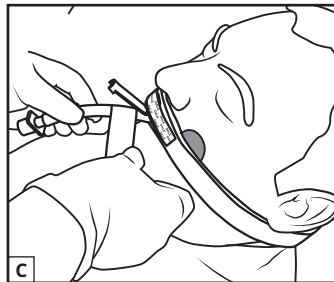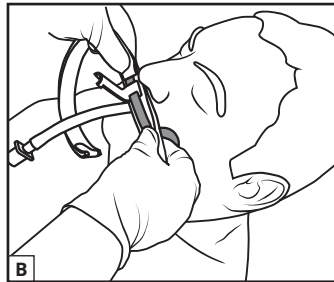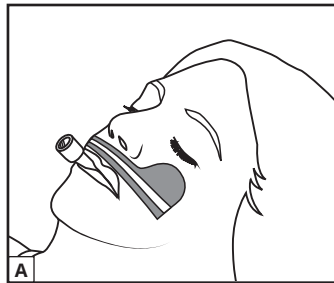

Tube Opnieuw Positioneren

Houd het getapete KANAAL met één hand vast en verwijder de DALE-OVERLAY van de RAIL. Verschuif het KANAAL om de tube naar de gewenste locatie te verplaatsen. Druk de DALE-OVERLAY terug op de RAIL en de halsband om de tube op zijn plaats te vast te zetten.

Verwijderen

Het hulpmiddel moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen. Wrijf de huid opnieuw in met een huidbeschermingsdoekje als een nieuw hulpmiddel wordt aangebracht.

Dale **beveelt aan de endotracheale tube vaak opnieuw te positioneren** om door aanhoudende druk veroorzaakt letsel aan de lippen en onderliggende weefsels te helpen voorkomen.

Dale **beveelt ten zeerste aan de slangen van het beademingstoestel te ondersteunen** om de druk op het gezicht van de patiënt te verminderen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmpje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Dale & BreezeLock zijn geregistreerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.

