

# Dale® BreezeLock® Endotracheal Tube Holder



For Comfortable & Secure Stabilization

# Dale® Medical Products



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

(Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Thai, Turkish)

# Dale® Medical Products






## BreezeLock® Endotrachealtubushalter

passend für Endotrachealtuben der Größen 7,0–10,0mm

**Inhalt:** je ein Nackenband, ein 273 Klebestreifen, eine Bandrolle

### Anwendung

1. Tubus säubern und trocknen lassen.
2. Klebestreifen aufbringen. (A) Anweisungen auf der Verpackung des 273 befolgen.
3. Nackenband so auf das Hakenteil am Klebestreifen drücken, dass die FÜHRUNGSSCHIENE über dem Mund des Patienten zentriert ist. (B)
4. Die an beiden Enden des Nackenbandes befindlichen Befestigungslaschen öffnen und das Nackenband unmittelbar unterhalb der Ohren um den Kopf legen. Befestigungslaschen an der Außenseite des Nackenbandes sichern
5. DALE SCHUTZAUFLAGE anheben. KANAL über dem Endotrachealtubus positionieren. DALE SCHUTZAUFLAGE über die FÜHRUNGSSCHIENE und das Nackenband drücken, um die Teile zu fixieren.
6. Befestigung des Tubus am KANAL mittels Klebeband:
  - Tubus frei unter dem KANAL auflegen lassen und ein 15 cm langes Stück des mitgelieferten Klebebands einmal um den Tubus wickeln. (C)
  - TUBUSKANAL nach unten auf den Tubus drücken.
  - Klebeband spiralförmig vorwärts fest um den Tubus und KANAL wickeln. (D)
  - Optional: Mindestens 2,5 cm über das Ende des TUBUSKANALS hinaus mit Klebeband umwickeln.
7. Der sichere Sitz des Nackenbandes wird durch bedarfsweises Anpassen der Befestigungslaschen sichergestellt.
  - Klebeband am KANAL je nach Bedarf wechseln.
  - Produkt nach 3 Tagen oder bei Bedarf früher wechseln.
  - Zur Vermeidung von Hautulzerationen oder -rissen sind die Haut und der Gesundheitszustand des Patienten vor Anbringen dieses Produkts zu beurteilen. Täglich oder ggf. auch häufiger prüfen.

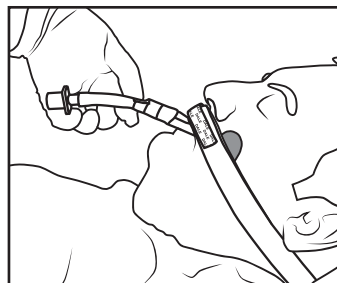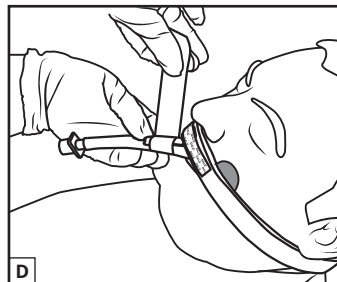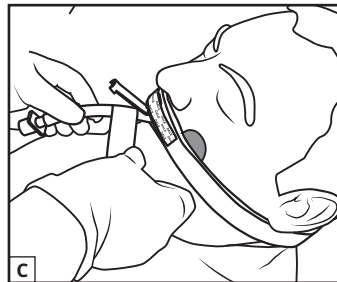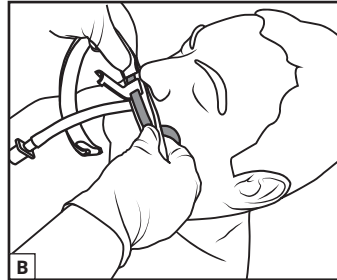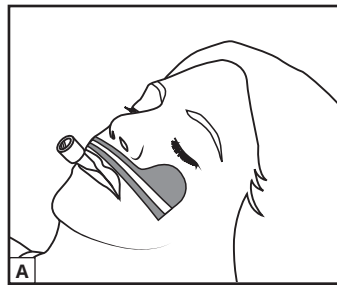

### Neupositionierung des Tubus

Den mit Klebeband befestigten KANAL mit einer Hand festhalten und die DALE SCHUTZAUFLAGE von der FÜHRUNGSSCHIENE abheben. KANAL verschieben, um den Tubus an der gewünschten Stelle zu positionieren. DALE SCHUTZAUFLAGE und Nackenband wieder auf die FÜHRUNGSSCHIENE nach unten drücken, um den Tubus zu fixieren.

### Entfernen

Produkt vorsichtig abziehen, um Hautverletzungen zu vermeiden. Hautvorbereitungsmittel erneut auftragen, wenn ein weiteres Produkt angebracht werden soll.

Dale **empfiehlt eine häufige Neupositionierung des Endotrachealtubus**, um eine Verletzung der Lippen und des darunterliegenden Gewebes durch andauernden Druck zu vermeiden

Dale **empfiehlt ausdrücklich, den Beatmungstubus abzustützen**, um den Druck auf das Gesicht des Patienten zu reduzieren.

Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt. Einwegartikel.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Patent [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale und BreezeLock sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.

