


Hold-n-Place® Suporte para Tubo de Cateter de Foley

Aplicação da Correia de Perna

 Posicionar a banda das pernas por baixo e à altura da coxa do doente, com a etiqueta do produto Dale a apontar para o interior da perna. Esticar a faixa da perna igualmente de ambos os lados para o sítio e apertar a aba do gancho. A compressão correcta é obtida quando dois dedos se encaixam confortavelmente sob a banda.



- 2. Coloque o cateter Foley sobre a costura branca da lingueta verde. Deixe um círculo largo no cateter sobre a correia de perna a fim de evitar tração da bexiga; ou estique o cateter para obter tração, quando necessário. 3. Com o cateter na posição
- desejada, insira a lingueta estreita
- verde sobre o cateter e através da abertura quadrada de forma que a lingueta verde fique sobreposta. 4. Trave o cateter na posição ao puxar as linguetas verdes em direções opostas. Prenda as linguetas. Para reposicionar o

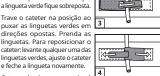

e feche a lingueta novamente. 5. Outro método para prender é localizar a porta Y da extremidade proximal do cateter no dispositivo de fecho.



Aplicação da Correia de Cintura

- Para prender o cateter, posicione a correia de cintura en torno do abdómem, acima do local do ferimento. Não é necessário depilar. A lingueta verde que prende o cateter deve ficar centrada acima do local do dreno. Depois de reposicionada a correia, prima a lingueta de fecho sobre a correia de cintura.
- 2. Coloque o cateter sobre a costura branca da lingueta verde.
- 3. Repita as etapas 3, 4 e 5 acima.

Benefícios Adicionais

Para ajudar a evitar a irritação do meato, a correia de perna pode ser girada em qualquer posição. Alternar as pernas periodicamente pode também proporcionar mais conforto ao paciente.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale e Hold-n-Place são marcas comerciais registadas da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido





Dale Medical Products, Inc. 40 Kenwood Circle • Suite 7

Franklin, MA 02038-3298, USA T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com



MDSS GmbH Schiffgraben 41





5000 Aarau, Switzerland 942171 REV D ©Copyright 2024 Portuguese