


Fixador para Curativos Nasais

Instruções de Aplicação

- Centralize a seção plástica do fixador sobre o curativo nasal e sob o nariz. Prenda ao colocar os aros auriculares ao redor das orelhas do doente.
- 2. Para ajustar o tamanho (da orelha ao nariz)
 - a. Levante a ponta da correia e reposicione o conjunto do aro auricular no comprimento desejado. Repita no outro lado.
 - b. Dobre a ponta da correia sobre o conjunto do aro auricular. O excesso de material da correia pode ser removido com uma tesoura.



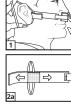



Para Trocar o Curativo

Para trocar o curativo nasal, remova um aro auricular, troque o curativo e recoloque o aro auricular em torno da orelha do doente.

Para a utilização numa única doente. Descartável Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda

www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido





Dale Medical Products, Inc. 40 Kenwood Circle • Suite 7

Franklin, MA 02038-3298, USA T: +1-508-695-9316 www.dalemed.com



MDSS GmbH Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany
MDSS CH GmbH



