



Držać Intravenskih Cjevčica

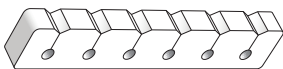

Razdvaja i organizira više intravenskih cjevčica (do 6) spojenih na istog bolesnika.


Upute za Primjenu Postavljanje jednog aparata

1. Umetnite svaku intravensku cjevčicu na predviđeno mjesto jednu po jednu.
2. Provjerite da cjevčice nisu zapetljane ili savinute.
3. Aparat možete:
 - Postaviti tako da visi na intravenskim cjevčicama
 - Položiti na bolesnički krevet.

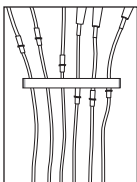

Postavljanje Više Aparata

1. Postavite do tri aparata držača intravenskih cjevčica na sljedeća mjesta:
 - Ispod infuzijske pumpe (Proksimalno)
 - Na polovicu dužine intravenskih cjevčica (Intermedijalno)
 - Pored najnižeg mjesta injektiranja blizu bolesnika (Distalno).

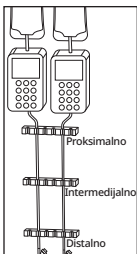

2. Umetnite svaku cjevčicu na predviđeno mjesto na svakom aparatu.
3. Provjerite da cjevčice nisu zapetljane ili savinute.

Za primjenu na samo jednom bolesniku. Jednokratno.

Napomena korisniku i/ili bolesniku: svaki ozbiljan incident koji se dogodi povezano s ovom napravom treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili bolesnik registriran ili rezident.

Patent : www.dalemed.com/patents

Dale je registrirani žig tvrtke Dale Medical Products, Inc. u SAD-u, EU-u i UK-u.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

