


## I.V.-Slangeholder

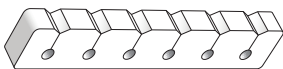


Beregnet til at adskille og organisere flere i.v.-slanger (op til 6), der er forbundet til en enkelt patient.

### Brugsanvisning

#### Opsætning med en Enkelt Slangeholder

1. Før én i.v.-slange ad gangen ind i hver sin rille.
2. Efterse alle slangerne for knæk eller snoninger.
3. Slangeholderen kan anbringes:


- Ophængt på i.v.-slangerne.
- Liggende fladt ned på patientens seng.

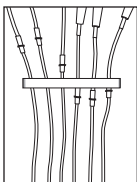

#### Opsætning med Flere Slangeholdere

1. Der kan bruges op til tre i.v.-slingeholdere på følgende placeringer:

- Under infusionspumpen. (Proksimalt)
- Midt på i.v.-slangerne. (Mellemposition)
- Ud for den lavest placerede injektionsport tæt på patienten. (Distalt)

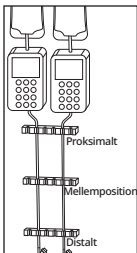

2. Før én slange ad gangen ind i hver sin rille på hver slangeholder.
3. Efterse alle slangerne for knæk eller snoninger, efter slangerne er isat.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med dette udstyr, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Patent: [www.dalemed.com/patents](http://www.dalemed.com/patents)

Dale er et registreret varemærke, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.



**Dale Medical Products, Inc.**  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
T: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany



**MDSS CH GmbH**  
Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau, Switzerland

