



Hulpmiddel voor Infuuslijnmanagement

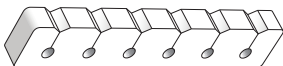

Bestemd voor het scheiden en organiseren van meerdere op één patiënt aangesloten infuuslijnen (maximaal 6).

Gebruiksaanwijzing Opstelling van Één Hulpmiddel

1. Plaats elke infuusslang één voor één in de ervoor bestemde sleuf.
2. Controleer alle slangen op knikken of verdraaiingen.
3. U kunt het hulpmiddel als volgt plaatsen:

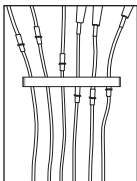


- Hangend aan de infuusslangen
- Plat op het bed van de patiënt.

Opstelling van Meerdere Hulpmiddelen

1. Gebruik maximaal drie hulpmiddelen voor infuuslijnmanagement op de volgende locaties:

- Onder de infuuspomp. (Proximaal)
- Halverwege de infuusslangen. (Intermediair)
- Naast de laagste injectiepoort bij de patiënt. (Distaal)

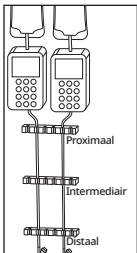

2. Plaats elke infuusslang in de ervoor bestemde sleuf van elk hulpmiddel.
3. Controleer na plaatsing alle slangen op knikken of verdraaiingen.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt: elk ernstig incident dat zich met dit hulpmiddel voordoet, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

