


IV-letkujen Järjestin

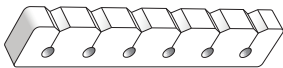


Tarkoitettu erottamaan ja järjestämään useita (enintään 6) yhteen potilaaseen liitettyjä IV-letkuja.

Käyttöohjeet

Yhden Laitteen Asettaminen

1. Työnnä kukin IV-letku yksitellen sille tarkoitettuun aukkoon.
2. Tarkista, etteivät letkut ole taittuneet tai kiertyneet.
3. Voit asettaa laitteen paikalleen:

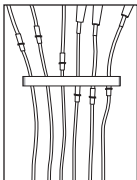


- Riippumaan IV-letkusta
- Vaaka-asentoon potilaan vuoteelle.

Usean Laitteen Asettaminen

1. Käytä enintään kolmea IV-letkujen järjestinlaitetta seuraavissa kohdissa:

- Infuusiopumpun alapuolella.
(Proksimaalinen)
- IV-letkun puolivälissä.
(Keskellä oleva)
- Alimman injektioportin vieressä lähellä potilasta.
(Distaalinen)

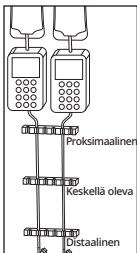

2. Aseta kukin letku kunkin laitteen vastaavaan aukkoon.
3. Tarkista asettamisen jälkeen, etteivät letkut ole taittuneet tai kiertyneet.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Käyttäjälle ja/tai potilaalle tarkoitettu tieto siitä, että laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Patentti www.dalemed.com/patents

Dale on Dale Medical Products Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

