


Organisateur de Lignes IV

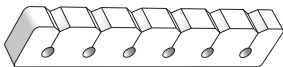

Conçu pour séparer et organiser plusieurs lignes IV (jusqu'à 6) connectées à un seul patient.

Mode d'Emploi


Montage pour un Dispositif Unique

1. Insérez chaque tube IV dans sa fente désignée, un à la fois.

2. Inspectez tous les tubes pour détecter les entortillements ou les torsions.

3. Positionnements possibles du dispositif:


- Suspendu sur le tube IV.
- À plat sur le lit du patient.

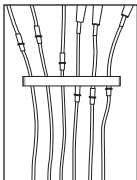

Montage pour Plusieurs Dispositifs

1. Utilisez jusqu'à trois organisateurs de lignes IV dans les endroits suivants:

- Au-dessous de la pompe à perfusion. (Proximal)
- Au milieu du tube IV. (Intermédiaire)
- À côté du port d'injection le plus bas près du patient. (Distal)

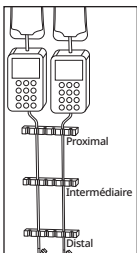

2. Insérez chaque tube dans sa fente correspondante sur chaque dispositif.

3. Inspectez tous les tubes pour détecter les entortillements ou les torsions après l'insertion.

Pour utilisation par un seul patient. Jetable.

Avis à l'utilisateur et/ou au patient : tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre à l'endroit où l'utilisateur et/ou le patient se trouve(nt).

Brevet www.dalemed.com/patents

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

