



IV-Leitungs-Halter

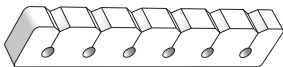

Zur Trennung und Organisation mehrerer IV-Leitungen (bis zu 6), die an einen einzelnen Patienten angeschlossen sind.

Gebrauchsanweisung Einrichtung Eines Einzelnen Halters

1. Jede IV-Leitung nacheinander in den dafür vorgesehenen Schlitz einführen.
2. Alle Leitungen auf Knicke oder Verdrehungen prüfen.
3. Der Halter kann wie folgt platziert werden:

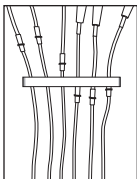


- An den IV-Leitungen hängend.
- Flach auf dem Patientenbett liegend.

Einrichtung Mehrerer Halter

1. Bis zu drei IV-Leitungs-Halter können an den folgenden Positionen verwendet werden:

- Unterhalb der Infusionspumpe. (Proximal)
- In der Mitte der IV-Leitungen. (Intermediär)
- Neben dem untersten Injektionsanschluss in Patientennähe. (Distal)

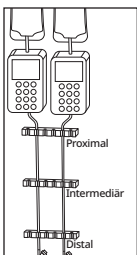

2. Jede IV-Leitung in den entsprechenden Schlitz des jeweiligen Halters einführen.
3. Alle Leitungen nach dem Einführen auf Knicke oder Verdrehungen prüfen.

Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten.
Einwegprodukt.

Hinweis für den Anwender und/oder den Patienten:
Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit diesem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, zu melden.

Patent siehe www.dalemed.com/patents

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

