


点滴ラインマネージャー

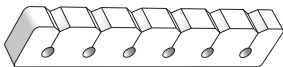


本製品は、患者1人に繋げている複数の点滴ライン（上限6管）を絡まらないように整理します。

使用方法

デバイスを1つ使う場合の設定方法

1. 各点滴チューブを1本ずつ決められたスロットに嵌めます。
2. よじれたり絡まったりしていないか全てのチューブを確認します。
3. このデバイスは以下の使い方ができます。

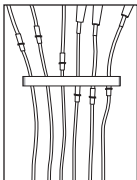


- 点滴チューブに掛けたまま
- 患者のベッドに寝かせる

デバイスを複数使う場合の設定方法

1. 以下の位置で点滴ラインマネージャーを3つまで使用できます。

- 輸液ポンプの下（近位）
- 点滴チューブの中間点（中間）
- 患者近くの最も低い位置にある注入ポートの傍（末端）

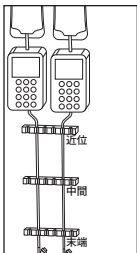

2. 各チューブを各デバイスの決められたスロットに嵌めます。
3. 嵌めた後、よじれたり絡まったりしていないか全てのチューブを確認します。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

使用者／患者への通知。本デバイスに関連して発生したいかなる重大な事故も、製造会社及び使用者／患者を管轄対象とする加盟国の所轄官庁に報告すること。

特許 www.dalemed.com/patents

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

