


정맥 주사선 관리기

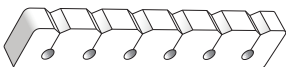


단일 환자에게 연결된 여러 개의 정맥 주사선(최대 6개)을 구분하고 정리하기 위한 기기입니다.

사용 지침

단일 기기 설치

1. 각 정맥 주사관을 지정된 슬롯에 한 번에 하나씩 삽입하십시오.
2. 모든 배관에 꼬임이나 비틀림이 없는지 확인하십시오.
3. 기기는 다음과 같이 배치할 수 있습니다:

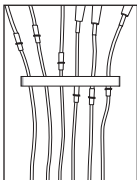


- 정맥 주사 배관에 걸어 놓기.
- 환자의 침대에 평평하게 두기.

다중 기기 설치

1. 정맥 주사선 관리기를 최대 3개까지 다음 위치에서 사용하십시오:

- 주입 펌프 아래. (근위부)
- 정맥 주사 배관 중간. (중간부)
- 환자 가까이에 있는 가장 낮은 주입 포트 옆. (원위부)

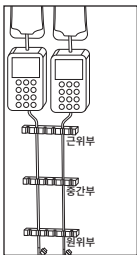

2. 각 주사관을 각 기기의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
3. 삽입 후, 모든 배관에 꼬임이나 비틀림이 없는지 확인하십시오.

단일 환자용. 1회용.

사용자 및/또는 환자 고지 사항: 이 기기와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체에 그리고 사용자 및/또는 환자가 정착한 회원국의 관할 당국에 신고해야 합니다.

특허 www.dalemed.com/patents

Dale은 미국, 유럽 연합 및 영국에서 Dale Medical Products Inc.의 등록 상표입니다.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

