


IV-Slangefeste

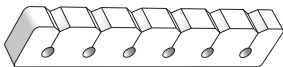


Tiltenkt for separering og organisering av flere IV-slangere (inntil 6 stk.) som er koblet til én pasient.

Anvisninger for Bruk


Installere én Enhet

1. Legg én og én IV-slange om gangen i det aktuelle sporet.
2. Påse at ingen av slangene er knekt eller vridd.
3. Enheten kan plasseres:
 - Hengende på IV-slangene.
 - Liggende flatt på pasientens seng.

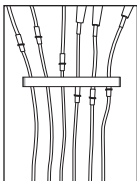

Installere Flere Enheter

1. Bruk inntil tre IV-slange-fester på følgende steder:
 - Nedenfor infusjons-pumpen (Proksimalt)
 - Midtveis mellom IV-slangene (Mellomliggende)
 - Ved siden av den laveste injeksjonsporten nær pasienten (Distalt)
2. Legg hver av slangene i det aktuelle sporet i hver enhet.
3. Påse at ingen av slangene er knekt eller vridd etter ilegging.

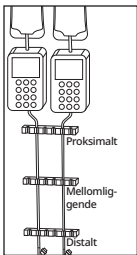

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Merknad til brukeren og/eller pasienten: Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal meldes til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten holder til.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

