


Organizer Linii Dożylnych

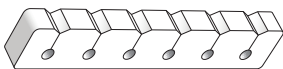


Przeznaczony do rozdzielania i uporządkowania kilku linii dożylnych (maks. 6) podłączonych do jednego pacjenta.

Instrukcja Użycia

Konfiguracja z Jednym Urządzeniem

1. Wprowadź kolejno każdą linię dożylną do odpowiedniej szczeliny.
2. Sprawdź wszystkie linie pod kątem załamań i skręceń.
3. Urządzenie można umieścić:

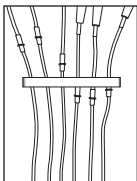


- W pozycji wiszącej na liniach dożylnych.
- Płasko na łóżku pacjenta.

Konfiguracja z Kilкома Urządzeniami

1. Umieść maks. trzy organizery linii dożylnych w następujących miejscach:

- Pod pompą infuzyjną. (Proksymalne)
- Pośrodku linii dożylnych. (Pośrednie)
- Przy najniższej usytuowanym porcie iniekcyjnym obok pacjenta. (Dystalne)

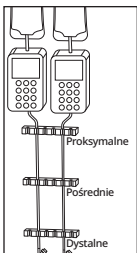

2. Wprowadź każdą linię do odpowiadającej jej szczeliny w urządzeniu.
3. Po wprowadzeniu sprawdź wszystkie linie pod kątem załamań i skręceń.

Do użycia u jednego pacjenta. Produkt jednorazowego użytku

Powiadomienie dla użytkownika i/lub pacjenta; jakiegokolwiek ciężkiego zdarzenia, które wystąpi w związku z tym wyrobem należy zgłosić do producenta i właściwego organu kraju członkowskiego, na terenie którego użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dale Medical Products, Inc. w Stanach Zjednoczonych, UE i Wielkiej Brytanii.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

