


Organizador de Linhas de Infusão

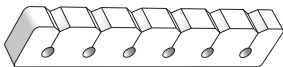


Serve para separar e organizar várias linhas de infusão (até seis) ligadas a um único paciente.

Instruções de Uso

Instalação de um Único Dispositivo

1. Insira cada tubo de infusão em seu espaço designado, um de cada vez.
2. Verifique se não há dobras ou torções nos tubos.
3. O dispositivo pode ser posicionado:

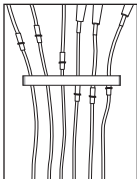


- Pendurado no tubo de infusão.
- Deitado sobre a cama do paciente.

Instalação de Vários Dispositivos

1. Utilize até três organizadores de linhas de infusão nos seguintes locais:

- Abaixo da bomba de infusão. (Proximal)
- Na parte intermediária do tubo de infusão. (Intermediário)
- Próximo ao ponto de injeção mais baixo, junto ao paciente. (Distal)

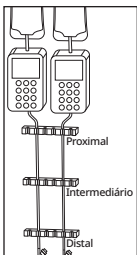

2. Insira cada tubo no espaço correspondente em cada dispositivo.
3. Verifique novamente se os tubos não apresentam dobras ou torções após a inserção.

Para uso por um único paciente; descartável.

Aviso ao usuário e/ou paciente: qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o usuário e/ou paciente reside.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale é uma marca registrada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

