


Organizador de Vías IV

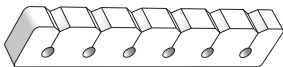


Diseñado para separar y organizar múltiples vías IV (hasta 6) de un solo paciente.

Instrucciones de Uso

Configuración de un Solo Dispositivo

1. Inserte cada vía IV en su ranura designada, una por una.
2. Verifique que las vías no estén torcidas o dobladas.
3. El dispositivo puede colocarse:

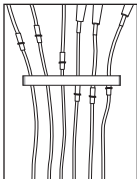


- Colgando en la vía IV.
- Plano sobre la cama del paciente.

Configuración de Múltiples Dispositivos

1. Utilice hasta tres organizadores de vías IV en las siguientes ubicaciones:

- Debajo de la bomba de infusión. (Proximal)
- Hacia la mitad del largo de las vías IV. (Intermedio)
- Cerca del puerto de inyección más cerca del paciente. (Distal)

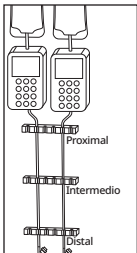

2. Inserte cada vía IV en su ranura correspondiente en cada dispositivo.
3. Después de insertar las vías, verifique que las vías no estén torcidas o dobladas.

Para utilizar en un solo paciente. Desechable.

Aviso para el usuario o paciente: todo incidente grave que ocurra con este producto debe reportarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro donde reside el usuario o paciente.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

