


Hållare för Intravenösa Slangar

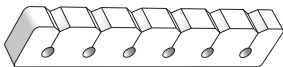


Avsedd för att hålla isär och ordna flera intravenösa slangar (upp till 6 st.) som är anslutna till en enstaka patient.

Anvisningar för Användning

Iordningställning av en Enstaka Hållare

1. Sätt in varje intravenös slang i dess avsedda spår, en i taget.
2. Kontrollera alla slangarna och se efter att de inte är knickade eller vridna.
3. Du kan placera hållaren:

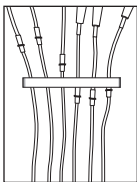


- Hängande på de intravenösa slangarna.
- Liggande plant på patientens säng.

Iordningställning av Flera Hållare

1. Använd upp till tre hållare för intravenösa slangar, på följande platser:

- Nedanför infusionspumpen.
(Proximal)
- Halvägs utmed de intravenösa slangarna.
(Mellanliggande)
- Intill den lägsta belägna injektionsporten nära patienten.
(Distal)

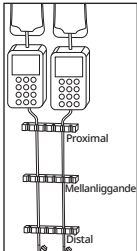

2. Sätt in varje slang i dess avsedda spår i varje hållare.
3. Efter att du har satt in alla slangarna, kontrollera att de inte är knickade eller vridna.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

Meddelande till användaren och/eller patienten: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad.

Patent: www.dalemed.com/patents

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

