


อุปกรณ์จัดการสาย IV

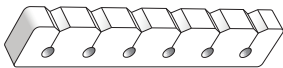


สำหรับแยกและจัดระเบียบสาย IV หลายเส้น (ได้สูงสุดถึง 6 เส้น) ที่เชื่อมต่อกับผู้ป่วยรายเดียว

คำแนะนำในการใช้งาน


การติดตั้งอุปกรณ์แบบชิ้นเดียว

1. ใส่สาย IV แต่ละเส้นเข้าไปในช่องที่กำหนดไว้ทีละเส้น
2. ตรวจสอบสายทั้งหมดว่าไม่มีการบิดงอหรือพันกัน
3. สามารถวางอุปกรณ์ได้ดังนี้
 - แขนงกับสาย IV
 - วางราบบนเตียงของผู้ป่วย

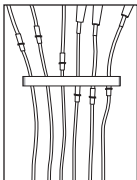

การติดตั้งอุปกรณ์แบบหลายชิ้น

1. ใช้อุปกรณ์จัดการสาย IV ได้สูงสุดสามชิ้นในตำแหน่งต่อไปนี้
 - ได้เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (ตำแหน่งต้นทาง)
 - กลางสาย IV (ตำแหน่งกลาง)
 - ถัดจากพอร์ตฉีดยาต่ำสุดใกล้ผู้ป่วย (ตำแหน่งปลายทาง)

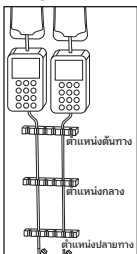

2. ใส่สายแต่ละเส้นลงในช่องที่ตรงกันบนแต่ละอุปกรณ์
3. ตรวจสอบสายทั้งหมดว่าไม่มีการบิดงอหรือพันกันหลังจากใส่สายเรียบร้อยแล้ว

ใช้กับผู้ป่วยเพียงรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

แจ้งให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยทราบ : เหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ควรรายงานให้ผู้ผลิตและหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกที่ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยตั้งอยู่ทราบ

สิทธิบัตร www.dalemed.com/patents

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

